


Anbringelse

Dale-abdominalbælter fås i en række størrelser. To bælter kan sættes sammen, så de passer til en meget stor patient.


1. Anbring bællet under patienten og stræk den ene ende ud. Et korrekt stræk giver den nødvendige kompression.
 2. Stræk bællet over patientens mave og hold i det med den ene hånd. Bællet kan anbringes lige eller i en vinkel, hvis yderligere tryk er nødvendigt på øvre eller nedre abdomen.
 3. Stræk den anden ende hen over i den ønskede vinkel.
 4. Tryk bællet ind, så det lukker, mens du strækker det.
- Sørg for at strække bællet tilstrækkeligt. Husk, at en god tilpasning ikke begrænser vejrtrækningen; strækningen og kompressionen gør faktisk en dyb vejrtrækning nemmere.

Sådan anvendes drænslinger

Der kan skæres et hul i Dale-abdominalbællet til f.eks. at rumme drænslinger og ernæringssonder. Anbring bællet på patienten, således at der kun er en enkelt tykkelse over drænstedet. Skriv et X på stoffet, hvor hullet skal laves, fold stoffet og klip et ellipseformet hul i materialet (se illustrationen). Når stoffet strækkes, vil det ellipseformede hul blive rundt og kunne rumme drænet. Hullets diameter vil være lig med den klippede længde.

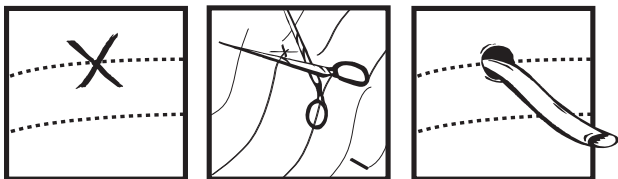


†Applying the EasyGrip™ Strip

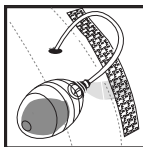

1. Tag EasyGrip™-båndet af bællet.
2. Ved anvendelse med drænbold føres EasyGrip™-båndet ind gennem drænboldens strop; og det fastgøres på bællet igen.

† Følg altid bedste praksisstandarder til drænanordninger.

Påsættelse ved egen hjælp

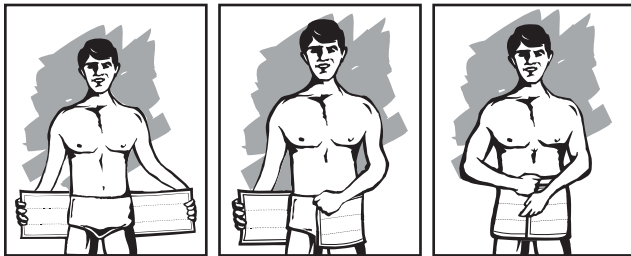

1. Anbring øverste kant lige under navlen og stræk ud til siden.
2. Svøb det om dig.
3. Tryk bællet ind, så det lukker forsvarligt.

Vask og pleje

 Maskinvaskes KOLD

 Eller vaskes i hånden

 Må ikke bleges

 Tørres på snor

Maskin- eller håndvaskes i koldt vand med mildt vaskemiddel. Før vask skal du sikre dig, at krog og loopoverfladerne er forsvarligt fastgjort for at forhindre, at der skal samle sig frug på dem, som kan interferere med krog og loop-fibrene og svække deres lukkeegenskaber. Hænges til tørre.

Bestilling

Dale-abdominalbælter fås hos forhandlere af hospitals-/medicinsk udstyr, pakket ét per kasse.

For at finde størrelsen måles kvindens hofter; mandens talje.

525	2 panel	6" (15 cm) strækkes til størrelsen 28-50" 71-127 cm
410	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 30-45" 76-114 cm
411	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 46-62" 117-157 cm
418	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 60-75" 152-191 cm
810	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 30-45" 76-114 cm
811	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 46-62" 117-157 cm
818	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 60-75" 152-191 cm
820	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 72-94" 183-239 cm
920	5 panel	15" (38 cm) strækkes til størrelsen 72-94" 183-239 cm

Dale-abdominalbælte

Dale-abdominalbællet støtter abdominalmusklerne, mens mobiliteten og genoptræningen af musklerne fremmes.

Bællet er udelukkende fremstillet af Dales eksklusive strækmateriale, som muliggør velcirkulering et hvilket som helst sted for en mere præcis og komfortabel tilpasning. Jævnt fordelt kompression fremmer hosten og dyb vejrtrækning. Patienter kan gå mere behageligt, hvilket reducerer muligheden for sedentære komplikationer såsom atelektase, pneumoni og flebitis.

Anvendelse

Dale-abdominalbællet yder støtte og komfort efter indgreb såsom:

- Kejsersnit
- Hysterektomi
- Fedtsugning
- Gastroplastik
- Abdominalplastik
- Fødsel

Nøglefunktioner

- **Fremstillet uden naturgummilatex.** Eliminerer bekymringer om patientens eller plejerens overfølsomhed over for latex.
- **Ny, innovativ sammenføjningssøm.** Syning uden mellemrum giver større patientkomfort.
- **Jævnt fordelt kompression.** Dales eksklusive strækmateriale fordeler kompression jævnt rundt om kroppen uden at skride, danne folder eller at være begrænsende.
- **Længere produktlevetid.** Materialet kan tages af og på uendeligt mange gange. Der kan opstå nogen loddenhed, men dette forbedrer faktisk støtteevnen.
- **Kroge og sløjfer lukninger** Bællet åbnes og lukkes hurtigt og nemt ved forbindings- og såreftersyn. Kan fastgøres til et hvilket som helst sted på bæltets omkreds for en præcis tilpasning.
- **EasyGrip™-bånd.** Holder op til fire drænbolde på plads uden på abdominalbællet.

Til brug til en enkelt patient.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU. EasyGrip™ er et varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA