


Instructions pour l'application

Les ceintures abdominales Dale™ sont disponibles dans une gamme de tailles. Deux ceintures peuvent être assemblées pour les patients plus corpulents.


1. Placez la ceinture sous le patient et tirez l'une des extrémités vers vous. L'extension correcte fournit la compression nécessaire.
 2. Étirez la ceinture sur le ventre du patient et maintenez-la avec une main. Vous pouvez placer la ceinture droite ou en diagonale si une pression supplémentaire est nécessaire sur le haut ou le bas de l'abdomen.
 3. Étirez l'autre extrémité en lui faisant faire l'angle désiré.
 4. Pressez sur la ceinture pour la fermer tout en maintenant l'étirement.
- Assurez-vous de bien étirer la ceinture. Rappelez-vous : un maintien solide n'empêche pas la respiration ; l'étirement et la compression facilitent au contraire la respiration profonde.

Utilisation de drains

Vous pouvez couper un trou dans la ceinture abdominale Dale pour y positionner des tubes de drainage ou d'alimentation. Placez la ceinture sur le patient de façon à ce qu'une seule épaisseur recouvre le site de drainage. Marquez le tissu d'un X à l'endroit où il faut découper le trou, pliez le tissu et faites une ouverture en ellipse dans le matériau (voir l'illustration). Lorsque le tissu est tendu, la découpe elliptique deviendra circulaire pour faire passer le drain. Le diamètre du trou sera égal à la longueur de la découpe réalisée.

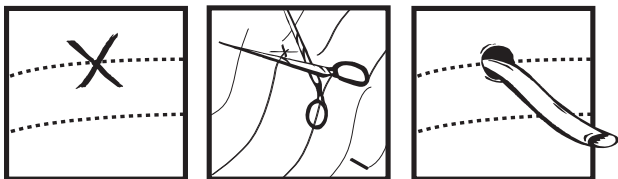


† Application de la bandelette EasyGrip™

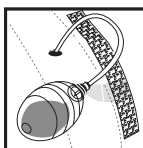

1. Dégager la bandelette EasyGrip™ de la ceinture.
 2. Pour l'usage avec une poche de drainage, faire passer la bandelette EasyGrip™ à travers la languette de la poche de drainage, puis la rattacher à la ceinture.
- † Respecter toujours les consignes d'usage des appareils de drainage.

Mise en place sur soi-même

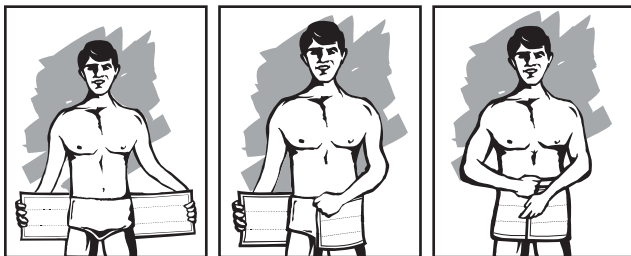

1. Positionner le bord supérieur juste en dessous du nombril et étirez la ceinture des deux côtés.
2. Fermez-la autour de vous.
3. Appuyez pour fermer solidement.

Nettoyage et entretien

- Lavable en machine à FROID
- Ou lavage à la main

- Ne pas utiliser d'agent javellisant
- Faire sécher sur un fil à linge

Lavez en machine ou à la main à froid avec un détergent doux. Avant de laver la ceinture, assurez-vous que les surfaces en la boucle du crochet sont solidement attachées l'une à l'autre pour prévenir la formation de bourre susceptible d'interférer avec les fibres la boucle du crochet de dégrader leurs propriétés de blocage. Faites sécher sur un fil à linge.

Pour commander

Les ceintures abdominales Dale sont disponibles auprès de distributeurs de matériel hospitalier/médical. Une ceinture par boîte.

Pour trouver la bonne taille, mesurez le tour de hanches des femmes et le tour de taille des hommes.

525	2 panneaux	6" (15cm) s'étire sur	28-50" 72-127 cm
410	3 panneaux	9" (23cm) s'étire sur	30-45" 76-114 cm
411	3 panneaux	9" (23cm) s'étire sur	46-62" 117-157 cm
418	3 panneaux	9" (23cm) s'étire sur	60-75" 152-191 cm
810	4 panneaux	12" (30cm) s'étire sur	30-45" 76-114 cm
811	4 panneaux	12" (30cm) s'étire sur	46-62" 117-157 cm
818	4 panneaux	12" (30cm) s'étire sur	60-75" 152-191 cm
820	4 panneaux	12" (30cm) s'étire sur	72-94" 183-239 cm
920	5 panneaux	15" (38cm) s'étire sur	72-94" 183-239 cm

Ceinture abdominale Dale

La ceinture abdominale Dale supporte les muscles abdominaux tout en encourageant la mobilité et en favorisant le retour du développement musculaire.

La ceinture est faite entièrement de matériau extensible Dale exclusif, permettant une fermeture au crochet et boucle à n'importe quel endroit pour un ajustement plus précis et plus confortable. Distribuée de façon homogène, la compression favorise la toux et la respiration profonde. Les patients peuvent marcher plus confortablement, ce qui réduit la possibilité de complications liées à l'immobilité comme l'atélectasie, la pneumonie ou la phlébite.

Applications

La ceinture abdominale Dale fournit support et confort après des interventions comme:

- Une césarienne
- Une hystérectomie
- Une liposuction
- Une gastroplastie
- Une abdominoplastie
- Un accouchement

Principales caractéristiques

- **Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.** Élimine les soucis liés à l'hypersensibilité au latex du patient ou de son soignant.
- **Nouveau modèle d'agrafage.** Agrafage continu pour un meilleur confort du patient.
- **Une distribution régulière de la compression.** Le matériau extensible exclusif de Dale distribue la compression de manière régulière autour du corps sans créer ni fronces, ni boudin, ni constriction.
- **Un produit à durée de vie supérieure.** Le matériau peut s'engager et se désengager un nombre de fois illimité. Il peut pelucher mais cela ne fera que renforcer son maintien.
- **Fermures de boucles et boucles.** La ceinture s'ouvre et se ferme rapidement et facilement, permettant de mettre un pansement ou d'inspecter la blessure. La fermeture s'attache à n'importe quel niveau sur sa circonférence pour un ajustement précis.
- **Une bandelette EasyGrip™.** Permet de maintenir en place jusqu'à quatre poches de drainage à l'extérieur de la ceinture abdominale.

Usage réservé à un seul patient.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale™ est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'U.E. EasyGrip™ est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis.