


Istruzioni per l'applicazione

Le fasce addominali Dale sono disponibili in una gamma di taglie. È possibile unirne due per adattarle a pazienti particolarmente corpulenti.


1. Disporre la fascia sotto il paziente e tirarne una estremità. Una buona tensione assicura la necessaria compressione.
 2. Tendere la fascia sullo stomaco del paziente e trattenerla con una mano. La fascia può essere disposta dritta o diagonalmente per esercitare ulteriore pressione sulla parte superiore o inferiore dell'addome.
 3. Tendere l'altra estremità angolata nel modo desiderato.
 4. Premere sulla fascia per chiuderla mentre è tesa.
- Accertarsi di tendere adeguatamente la fascia, tenendo presente che una buona aderenza non limita la respirazione. Al contrario, la tensione e la compressione facilitano la respirazione profonda.

Uso di tubi di drenaggio

È possibile praticare un foro nella fascia addominale Dale per farvi passare tubi di drenaggio e di alimentazione. Disporre la fascia sul paziente, coprendo con un solo strato il sito del drenaggio. Contrassegnare con una X il tessuto in corrispondenza del foro da praticare, piegare il tessuto ed eseguire un taglio ellittico (vedere l'illustrazione). Quando si tende il tessuto, il taglio ellittico diventa un foro circolare attraverso il quale si può far passare il drenaggio. Il diametro del foro corrisponde alla lunghezza del taglio.

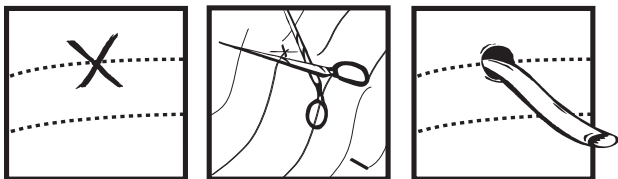


+ Applicazione di una striscia EasyGrip™

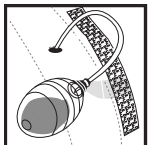

1. Sollevare la striscia EasyGrip dalla fascia.
 2. Per usare bulbi di drenaggio, far scorrere la striscia EasyGrip attraverso la linguetta del bulbo e riattaccarla sulla fascia.
- + Attenersi sempre agli standard della migliore pratica per i dispositivi di drenaggio.


Autoapplicazione

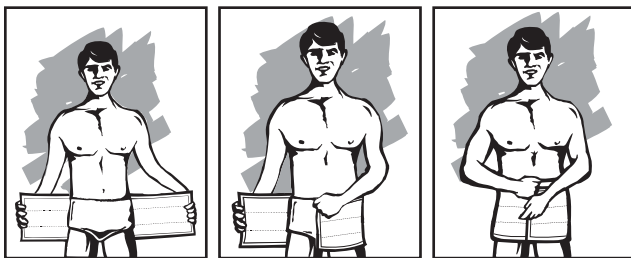

1. Disporre l'orlo superiore appena sotto l'ombelico e tirare lateralmente la fascia.
2. Avvolgersela attorno.
3. Premere bene per fissarla.

Lavaggio e cura

Lavare a mano o in lavatrice in acqua fredda e detergente neutro. Prima del lavaggio,

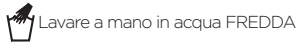

accertarsi che le superfici in Velcro siano ben chiuse, in modo da evitare l'accumularsi di filacce che potrebbero interferire con le fibre Velcro ed inibirne le proprietà interbloccanti. Lasciar asciugare all'aria.

Informazioni sugli ordinativi

Le fasce addominali Dale sono disponibili presso i concessionari di prodotti sanitari/ospedalieri, in confezione singola.

Per stabilire la taglia, misurare le donne sui fianchi e gli uomini in vita.

525	2 pannelli	6" (15cm)	Adatta ad una misura di 28-50"	72-127 cm
410	3 pannelli	9" (23cm)	Adatta ad una misura di 30-45"	76-114 cm
411	3 pannelli	9" (23cm)	Adatta ad una misura di 46-62"	117-157 cm
418	3 pannelli	9" (23cm)	Adatta ad una misura di 60-75"	152-191 cm
810	4 pannelli	12" (30cm)	Adatta ad una misura di 30-45"	76-114 cm
811	4 pannelli	12" (30cm)	Adatta ad una misura di 46-62"	117-157 cm
818	4 pannelli	12" (30cm)	Adatta ad una misura di 60-75"	152-191 cm
820	4 pannelli	12" (30cm)	Adatta ad una misura di 72-94"	183-239 cm
920	5 pannelli	15" (38cm)	Adatta ad una misura di 72-94"	183-239 cm

Fascia addominale Dale

La fascia addominale Dale sostiene i muscoli addominali, incoraggiando la mobilità e promuovendo l'irrobustimento muscolare.

La fascia è realizzata interamente con il materiale elastico esclusivo della Dale, che permette di usare la chiusura Velcro® in qualsiasi punto, conseguendo una calzata più precisa e confortevole. La compressione distribuita in modo uniforme agevola la tosse e la respirazione profonda. I pazienti possono camminare più comodamente, riducendo la possibilità di complicazioni sedentarie secondarie quali l'atelettasia, la polmonite e la flebite.

Applicazioni

La fascia addominale Dale fornisce sostegno e comfort dopo procedimenti quali:

- Parto Cesareo
- Sterectomia
- Liposuzione
- Gastroplastica
- Plastica addominale
- Parto

Caratteristiche principali

- **Non contiene lattice di gomma naturale.** Elimina ogni preoccupazione in merito all'eventuale ipersensibilità al lattice del paziente o del personale di cura.
- **Cuciture innovative.** Le cuciture continue assicurano il massimo comfort del paziente.
- **Compressione uniforme.** Il materiale elastico esclusivo della Dale distribuisce in modo più uniforme la compressione su tutta l'area circonferenziale, senza spostarsi verso l'alto, formare grinze o stringere.
- **Durata prolungata.** Il materiale può essere aperto e chiuso innumerevoli volte. La lanugine che può formarsi finisce per migliorare la presa della chiusura.
- **Chiusure a gancio e anello.** La fascia può essere aperta e chiusa rapidamente ai fini della medicazione e dell'ispezione della ferita. La chiusura può essere eseguita in qualsiasi punto della circonferenza per ottenere un preciso adattamento.
- **Striscia EasyGrip.** Trattiene in posizione fino a quattro bulbi di drenaggio all'esterno della fascia addominale.

Monopaziente.

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE. EasyGrip™ è un marchio di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti.