

(*Access Controller for Enteral [ตัวควบคุมการให้อาหารเหลว])

ใช้ได้กับระบบการให้อาหารทางสายแบบเปิดหรือแบบปิด

ACE Connector มีข้อป้ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงดันของเหลวเข้าและออกจากสายให้อาหารในการให้อาหารเหลว และการทำงานในรูปของเหลว โดยที่ไม่ต้องเจาะสายให้อาหารของแข็งใช้ได้เป็นเวลาสั้นถึง 30 วัน **ACE* Connector**. ระบบแบบเปิดจะป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านสุขภาพจากการสัมผัสกับแรงกดดันในกระเพาะของผู้ป่วยโดยบังเอิญ

วิธีการใช้

1 ขั้นตอนการให้อาหารเหลว

ACE Connector สามารถใช้แทนอะแดปเตอร์ให้อาหารเหลว PEG g-tube

- ถอดปลายด้านหัวสวนเข้ากับสายให้อาหาร
 - เลื่อนชุดให้อาหารหรือหลอดชนิดยาวกลับเข้าไปในอะแดปเตอร์ยึดหุ่นที่สาย
 - ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อให้อาหารเหลว
 - ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF เมื่อให้อาหารเหลวเสร็จและถอดชุดให้อาหารออกจากอะแดปเตอร์ยึดหุ่นที่สาย
- เมื่อใช้ **ACE Connector** กับสายให้อาหาร NG ให้ถอดปลายด้านหัวสวนเข้าโดยตรงกับสายให้อาหาร NG ปฏิบัติตามข้อ b-d ข้างต้นนี้

2 ขั้นตอนการชำระล้างด้วยหลอดชนิดยาว และการโยกในรูปของเหลว

ACE Connector มีคุณสมบัติป้องกัน เนื่องจากใช้เฉพาะหลอดชนิดยาวชนิดปลาย Luer




เป็นท่อนวน และไม่สามารถเสียบหลอดชนิดยาวชนิดปลาย Luer

- ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF
- ในขณะที่ยึดจับ **ACE Connector** เอาไว้ให้แน่น กดแล้วหมุนหลอดชนิดยาวของสายให้อาหารลงไปในช่องใส่หลอดชนิดยาวโดยยึดไม่ติดจนกว่าจะแน่นสนิท
- ปล่อยของเหลวที่เข้าใน **ACE Connector**
- ถอนหลอดชนิดยาว ช่องเสียบหลอดชนิดยาวจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ล้างด้วยน้ำอุ่นผ่านช่องเสียบหลอดชนิดยาว

3 ขั้นตอนการระบายและการดูดเสมหะ

ACE Connector สามารถใช้แทนคอนเนคเตอร์ 5-in-1 ที่ใช้กับสาย

- Salem, Levin และสายกระเพาะอาหาร
- ถอดคอนเนคเตอร์ 5-in-1 จากสายให้อาหารของผู้ป่วย
- ถอดอะแดปเตอร์ยึดหุ่นที่สายออกและใส่สายดูดเสมหะเข้ากับ **ACE Connector** โดยตรง
- ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อดูดเสมหะหรือระบาย
- ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดสายดูดเสมหะ หากต้องการ

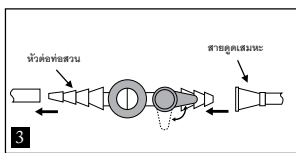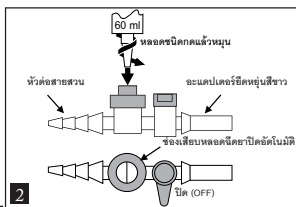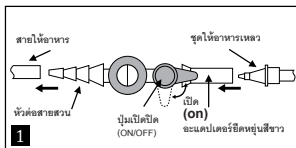

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ง่าย

กับในผู้ใหญ่และเด็ก

กฎหมายสหรัฐฯ กำหนดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยแพทย์ หรือคนในสังกัดของแพทย์

- ถ้าต้องการมีเอกสารภายใต้ผู้ป่วย ให้ปิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดชุดให้อาหารหรือสายดูดเสมหะ จากนั้นจึงสามารถมีเอกสารภายใต้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำๆ เพื่อให้อาหารและดูดเสมหะต่อได้ตามต้องการ **ACE Connector** ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของท่อสวนตามมาตรฐาน ทางสายแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ
- เปลี่ยนชุดใหม่ตามความจำเป็น ไม่แนะนำให้ใช้เกินกว่า 30 วัน
- ไม่ว่ามีอุปกรณ์ที่ทำงานตามคำแนะนำที่ให้มีไว้ หรือตามที่คาดไว้ ให้ล้าง **ACE Connector** ตามคำแนะนำและตรวจสอบการติดตั้งชุดให้อาหารเหลว หากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยน **ACE Connector** ขึ้นใหม่และติดตั้ง ชุดให้อาหารเหลวตามเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือ "การจัดการการให้อาหารเหลว"
- อุปกรณ์ **ACE Connector** เป็นวิธีเบื้องต้นในการให้อาหารเหลวแก่ผู้ป่วย สำหรับการให้อาหารในรูปที่มีปฏิสัมพันธ์มีของ สถานพยาบาลในเชิงการจัดการการให้อาหารเหลว ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ

Dale® ได้จากโรงพยาบาลผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการขายและสิทธิบัตรของสหรัฐฯ #6,165,168
#475 Dale® ACE Connector®
 บรรจุกล่อง
 จำนวนในกล่องละ ๕0 ชิ้น



Dale® Medical Products, Inc.
 40 Kenwood Circle • Suite 7
 Franklin, MA 02038-3298
 T: 508-695-9316
 www.dalemed.com



หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์จำหน่าย
 ธรรมดา

ผลิตในประเทศไทย 942183-ART_REV_I
 © 2017 Dale Medical Products, Inc.
 Dale® และ ACE Connector® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป



MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 D-30175 Hannover, Germany

