

(*Access Control for Enteral - *Ovladač přístupu pro enterální použití)

Pracuje s otevřenými nebo uzavřenými enterálními systémy


ACE Connector je indikován pro ovládání toku tekutin do lékařských trubiček a z nich, přičemž se stará o dodávku enterální formy, injekční proplachování a tekuté léky, bez toho, že by narušoval linku dodávky tekutin, po dobu až 30 dní. Tento uzavřený systém chrání zdravotnické pracovníky před náhodným vystavením žaludečním šťávám pacienta.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

1 Napájecí procedura

ACE Connector nahrazuje enterální napájecí adaptéry PEG pro g-trubičky.


- Připojte konektor katétru na napájecí trubičku.
- Vložte napájecí sadu či hrot stříkačky s bolusem do bílého flexibilního adaptéru.
- Otočte rukojeť do pozice ON (ZAP) pro dodávání napájecí formy.
- Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP), jakmile je napájení ukončeno, a vyjměte napájecí sadu z bílého flexibilního adaptéru.
- Je-li **ACE Connector** používán pro plnění NG, připojte konec konektoru katétru přímo do trubičky NG. Postupujte dle bodů b až d uvedených výše.

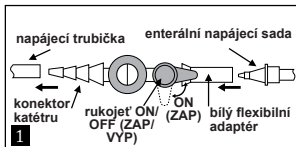

2 Proplachovací stříkačka pro hrot katétru/Proplachování a procedura dodávání tekuté léky

Z bezpečnostních důvodů přijme **ACE Connector** pouze proplachovací stříkačky pro hrot katétru a nepijme sady nebo stříkačky pro hrot typu luer.


- Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP).
- Přidrže **ACE Connector** a pevně **zatláče za současného otočení** hrot stříkačky pro zavedení katétru do samotěsnícího portu pro stříkačku, dokud není zajištěno těsné spojení.
- Naplňte tekutinu nebo lék do konektoru **ACE Connector**.
- Vyjměte stříkačku. Port „Auto-Seal“ stříkačky se automaticky uzavře.
- Propláchněte port stříkačky Auto-Seal teplou vodou.

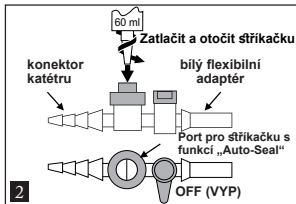

3 Drenážní a odsávací procedura

ACE Connector nahrazuje konektory 5-in-1 používané s typy Salem, Levin a žaludečními trubičkami.

- Vyjměte jakýkoliv konektor 5-in-1 z pacientovy trubičky.
- Připojte konec konektoru katétru na pacientovu trubičku.
- Odstraňte bílý flexibilní adaptér a připojte odsávací trubičku přímo na **ACE Connector**.
- Otočte rukojeť do pozice ON (ZAP) pro odsávání nebo odtok.
- Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a vyjměte odsávací trubičku, pokud je to třeba.

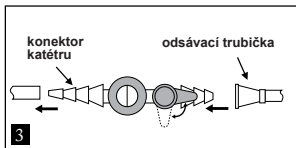

Pro použití u jednoho pacienta.

Uchovávejte na chladném suchém místě.

Federální zákony (v USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na předpis lékaře.

- Pro zmobilnění pacienta otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a rozpojte napájecí sadu nebo odsávací trubičku. Pacient se potom může pohybovat, jak je potřeba. Napájení a odtok může potom pokračovat dle potřeby při opakovaní výše uvedeného postupu.
- Změňte podle potřeby. Nedoporučuje se k použití po dobu delší než 30 dnů.
- V případě, že přístroj nefunguje dle návodu nebo dle očekávání, propláchněte **ACE Connector** důkladně dle návodu a zkontrolujte nastavení enterálního podání. Pokud problém přetrvává, vyměňte jej za nový **ACE Connector** a proveďte nastavení enterálního podání tak, jak je to třeba, podle nemocničního protokolu „provádění enterálního podávání“.
- ACE Connector** poskytuje primární metodu podání pro enterální způsob podání u pacienta. Při podávání léků postupujte dle protokolu nemocnice nebo zdravotnického zařízení, týkajícího se provádění enterálního podávání. Zdravotnické výrobky Dale jsou dostupné u vašeho dodavatele nemocničního/zdravotnického materiálu. Patent USA číslo 8,353,895

Informace pro objednání

475

Dale ACE Connector[®]
Jednotlivě baleno
Množství v krabici: 50.

Dale[®]



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Není vyrobeno za použití přírodního pryzového latexu

Vyrobeno v Číně 942183-ART_REV_J
©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale[®] a ACE Connector[®] jsou registrované obchodní známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

