

(*Access Controller for Enteral/styremekanisme til enteral adgang)

Fungerer med åpne eller lukkede systemer


ACE Connector er beregnet på å kontrollere væskestrøm inn og ut av medisinske slanger, samtidig som den skal sørge for tilførsel av enteral formel, sprøyteirrigasjon og flytende medisiner, uten å bryte væsketilførselsslengene, i opptil 30 dager. Dette lukkede systemet beskytter helsepersonell mot utilsikket eksponering for pasientens magevæsker.

BRUKSANVISNING

1 Prosedyre for å gi intravenøs næring

ACE Connector erstatter PEG g-slangens mellomstykker for enteral sonde.


- Fest kateterkoblingsenden til magesonden.
 - Før ernæringssettet eller bolussprøytespissen inn i hvitt fleksibelt mellomstykke.
 - Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å gi intravenøs næring.
 - Vri hendelen til OFF-stilling (AV) når prosedyren er fullført, og fjern ernæringssettet fra det hvite, fleksible mellomstykket.
- Når **ACE Connector** skal brukes til NG-mating, skal kateterkoblingsenden kobles direkte til NG-slangen. Følg anvisningene under b-d ovenfor.

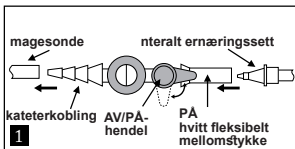

2 Irrigasjonsprøyte for kateterspiss/utskylling og prosedyre for å gi flytende medisiner

ACE Connector vil, som en sikkerhetsforanstaltning, bare kunne kobles til irrigasjonsprøyter med kateterspiss, og kan ikke koples sammen med administrasjonssett eller sprøyter med Luer-spiss.


- Vri hendelen til OFF-stilling (AV).
- Mens du holder fast **ACE Connector**, trykker og vrir du sprøyten på kateterspissen inn i sprøyteporten med automatisk tetning inntil den sitter godt.
- Tøm væske eller medisin i **ACE Connector**.
- Fjern sprøyten. Den automatisk forseglende sprøyteporten vil lukkes automatisk.
- Skyll med varmt vann gjennom den automatisk forseglende sprøyteporten.

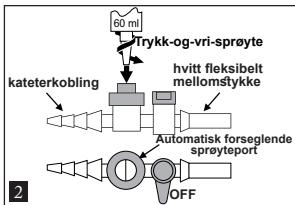

3 Drenerings- og sugesprosedyre

ACE Connector erstatter 5-i-1-koblinger som brukes med Salem, Levin og magesonder.

- Fjern eventuell 5-i-1-kobling fra pasientslangen.
- Fest kateterkoblingsenden til pasientslangen.
- Fjern det hvite fleksible mellomstykket, og fest sugeslangen direkte til **ACE Connector**.
- Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å suge eller drenere.
- Vri hendelen til OFF-stilling (AV) og koble fra sugeslangen, hvis ønskelig.

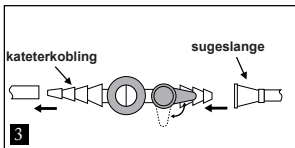

Til bruk på én pasient.

Oppbevares kjølig og tørt

Føderale lover i USA begrenser salg av dette utstyret til leger, eller etter beordring fra lege.

- Når pasienten skal ambulere, vrir du hendelen til OFF-stilling og kobler fra ernæringssettet eller sugeslangen. Pasienten kan deretter ambuleres etter behov. Tilføring av intravenøs næring og drenering kan fortsette ved behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor.
- Skift etter behov. Bruk i mer enn 30 dager anbefales ikke.
- Skyll **ACE Connector** grundig i henhold til instruksjonene, og kontroller entertal ernæringssett dersom anordningens ytelse ikke tilsvarer instruksjonene eller ikke fungerer som forventet. Hvis problemet ikke kan løses, skal **ACE Connector** og entertal ernæringssett byttes ut med et nytt, i henhold til sykehusets protokoll for "entertal ernæringsadministrasjon".
- ACE Connector** sørger først og fremst for en leveringsmetode for entertal mating av pasient. Ved administrering av medisiner skal sykehusets eller institusjonens protokoll for entertal ernæringsadministrasjon følges.

Dales medisinske produkter er tilgjengelige fra din aktuelle leverandør av sykehusutstyr/medisinsk utstyr.

Patentnummer 8,353,895

Bestillingsinformasjon

475

Dale ACE Connector[®]
Individuelt pakket.
Selges i esker à 50 stk.

Dale[®]



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Ikke laget med
naturgummilatte

Produsert i Kina 942183-ART_REV_1

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale[®] og ACE Connector[®] er registrerte varemærker som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

