

(*Access Controller for Enteral [ตัวควบคุมการให้อาหารเหลว])

ใช้ได้กับระบบการให้อาหารทางสายแบบเปิดหรือแบบปิด

ACE Connector มีข้อบ่งชี้ใช้สำหรับควบคุมของเหลวเข้าและออกจากสายให้อาหารในการให้อาหารเหลว การชำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว โดยที่ไม่ต้องเจาะสาย ให้อาหารเหลวซึ่งใช้ได้ในเวลาสั้นถึง 30 วัน **ACE* Connector**. ระบบแบบปิดนี้จะป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านสุขภาพจากการสัมผัสกับของเหลวในกระเพาะของผู้ป่วยโดยบังเอิญ


วิธีการใช้

1 ขั้นตอนการให้อาหารเหลว

ACE Connector สามารถใช้แทนแอดแapterให้อาหารเหลว PEG g-tube

- ต่อปลายด้านที่สวนเข้ากับสายให้อาหาร
- เสียบชุดให้อาหารหรือปลายหลอดฉีดยาบอลัสเข้าไปในอะแดปเตอร์ยึดหุ่นสีขาว
- บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อให้อาหารเหลว
- บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF เมื่อให้อาหารเหลวเสร็จและถอดชุดให้อาหารออกจากอะแดปเตอร์ยึดหุ่นสีขาว


เมื่อใช้ **ACE Connector** กับสายให้อาหาร NG ให้ต่อปลายด้านที่สวนเข้ากับโดยตรงกับสายให้อาหาร NG ปฏิบัติตามข้อ b-d ข้างต้นนี้

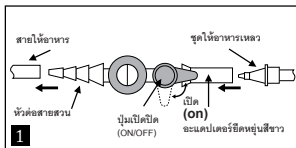

2 ขั้นตอนการชำระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว

ACE Connector มีคุณสมบัติปลอดภัย เนื่องจากเสียบได้เฉพาะหลอดฉีดยาชนิดปลาย เป็นท่อสวน และไม่สามารถเสียบหลอดฉีดยาชนิดปลาย Luer


- บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF
- ในขณะที่บิดปุ่ม **ACE Connector** เอาไว้ให้แน่น กดแล้วหมุนหลอดส่วนปลายของสายให้อาหารลงไปในช่อง
- ใส่หลอดชนิดปิดสนิทโดยอัตโนมัติจนถึงกว่าจะแน่นสนิทดี
- ปล่อยของเหลวหรือยาเข้าไปใน **ACE Connector**
- ถอนหลอดฉีดยา ของเสียบหลอดฉีดยาจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ล้างด้วยน้ำอุ่นผ่านช่องเสียบหลอดฉีดยา

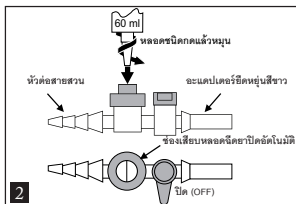

3 ขั้นตอนการระบายและกำจัดอุจจาระ

ACE Connector สามารถใช้แทนคอนเนคเตอร์ 5-in-1 ที่ใช้กับสาย Salem, Levin และสายกระเพาะอาหาร

- ถอดคอนเนคเตอร์ 5-in-1 จากสายให้อาหารของผู้ป่วย
- ต่อปลายด้านที่สวนเข้ากับสายให้อาหาร
- ถอดอะแดปเตอร์ยึดหุ่นสีขาวออกและต่อสายดูดอุจจาระเข้ากับ **ACE Connector** โดยตรง
- บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง ON เพื่อดูดอุจจาระหรือระบาย
- บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดสายดูดอุจจาระ หากต้องการ

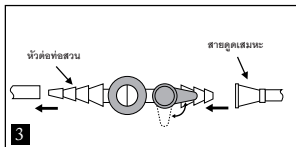

ใช้สำหรับผู้ป่วยหนึ่งราย

เก็บในที่เย็นและแห้ง

กฎหมายสหรัฐฯ จำกัดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยแพทย์ หรือตามใบสั่งของแพทย์

- ถ้าต้องการบอกรายการแพทย์ให้ผู้ป่วย ให้บิดปุ่มไปยังตำแหน่ง OFF และถอดชุดให้อาหารหรือสายดูดอุจจาระ จากนั้นจึงสามารถบอกรายการแพทย์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำๆ เพื่อให้อาหารและดูดอุจจาระต่อได้ตามต้องการ
- เปลี่ยนชุดใหม่ตามความจำเป็น ไม่แนะนำให้อายุเกินกว่า 30 วัน
- ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนไม่ทำงานตามคำแนะนำที่ไว้ หรือตามที่คาดไว้ ให้ล้าง **ACE Connector** ตามคำแนะนำและตรวจสอบการติดตั้งชุดให้อาหารเหลว หากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยน **ACE Connector** อันใหม่และติดตั้ง ชุดให้อาหารเหลวตามที่กำหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือ "การจัดการการให้อาหารเหลว"
- อุปกรณ์ **ACE Connector** เป็นวิธีเบื้องต้นในการให้อาหารเหลวแก่ผู้ป่วย สำหรับการให้ยา โปรดปฏิบัติตามคู่มือของ สถานพยาบาลในเรื่องการจัดการให้อาหารเหลว ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ

Dale ได้จากโรงพยาบาล/ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ท่านต้องการ
หมายเลขผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 8,353,895

ข้อมูลประกอบการสังเกตการณ์

475

Dale ACE Connector®
บรรจุภัณฑ์
จำหน่ายในกล่องๆ ละ 50 ชิ้น

Dale®



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
โทรศัพท์: 508-695-9316
www.dalem.com



ไม่ได้ผลิตด้วยยา
ลาที่กึ่งธรรมชาติ

ผลิตในประเทจีน 942183-ART_REV_1

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale® และ ACE Connector® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, เยอรมัน

