

(*Access Controller per Enteral o controllore dell'accesso all'apparato gastro-enterico.)

Adatto ai sistemi enterici a circuito aperto o chiuso, conformi a ISO 80369-3

L'ACE Connector è indicato per controllare il flusso dei fluidi in entrata ed in uscita dai tubi medici, oltre a permettere la somministrazione di formule enteriche e farmaci liquidi e irrigazione mediante siringhe, senza aprire le linee di erogazione fluidi, per un massimo di 30 giorni. Questo sistema a circuito chiuso protegge il personale sanitario dall'esposizione accidentale ai fluidi gastrici dei pazienti.

ISTRUZIONI PER L'USO

1 La procedura di alimentazione può essere seguita usando la maggior parte delle sonde di alimentazione di piccolo calibro tipo ENFit, dei tubi PEG/PEJ, la maggioranza delle sonde per gastrodigugnosomia e i set di alimentazione.

Quando si usa l'ACE Connector per l'alimentazione enterale, collegare l'uscita distale femmina ENFit dell'ACE al connettore maschio ENFit del tubo enterale. Seguire le istruzioni a-d successive.

- Collegare l'uscita femmina ENFit (lato distale) dell'ACE al connettore maschio ENFit della sonda di alimentazione del paziente.
- Allineare il set di alimentazione enterale con il connettore femmina ENFit e avvitare sull'entrata maschio ENFit (lato prossimale) dell'ACE Connector.
- Far ruotare la leva nella posizione ON per somministrare la formulazione di alimentazione.
- Far ruotare la leva nella posizione OFF alla fine dell'alimentazione e rimuovere il set dall'ACE Connector svitandolo.

L'ACE Connector viene usato assieme ai tubi PEG, BRT, gastrostomici e la maggior parte dei tubi di alimentazione enterale per gastrodigugnosomia.

*I tubi PEG senza palloncino possono richiedere l'impiego di un connettore bianco di transizione 80369-3 ENFit o di un adattatore universale, non fornito assieme all'ACE Connector.

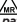
Siringa per irrigazione da 60 mL con punta ENFit / Procedura di lavaggio

2 somministrazione di farmaci liquidi

Per maggiore sicurezza, il nuovo ACE Connector è compatibile solo con le siringhe per irrigazione enterale con punta ENFit ed è incompatibile con le siringhe con punta per catetere o punta Luer, con i set di somministrazione con punta Luer o gli aghi ipodermici.

- Far ruotare la leva nella posizione OFF.
- Afferrando saldamente l'ACE, allineare, spingere e avvitare a fine corsa la siringa con punta femmina ENFit nell'entrata autosigillante per siringa. **NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO**
- Dispensare fluidi o farmaci o aspirare i residui gastrici tramite l'entrata autosigillante per siringa dell'ACE Connector.
- Rimuovere la siringa. L'entrata autosigillante per siringa con connettore maschio ENFit si chiude automaticamente.
- Irrorare con acqua l'entrata autosigillante per siringa finché non è pulita e priva di qualsiasi residuo di farmaco.
- Far ruotare la leva nella posizione ON.

Questo prodotto è compatibile con i connettori di transizione a gradini ENFit e con i connettori a imbuto ENFit.

3 **Compatibilità MR condizionata**  **I test non clinici hanno dimostrato che l'ACE CONNECTOR 485 ENFit™ Dale Medical è a compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione RM in modo sicuro subito dopo il posizionamento, nelle seguenti condizioni:**

- Campo magnetico statico pari solamente a 1,5 e 3 tesla.
- Massimo campo magnetico a gradiente spaziale pari o inferiore a 3000 gauss/cm.

Monopaziente / Conservare in un luogo fresco e asciutto

La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.

- Per consentire l'ambulation del paziente, far ruotare la leva nella posizione OFF e scollegare il set di alimentazione. A quel punto il paziente è in grado di camminare a piacimento. L'alimentazione può ricominciare a seconda della necessità, ripetendo le procedure suindicate. In conformità agli standard medici accettati, l'ACE Connector™ rimane incorporato nel catetere.
- Sostituire a seconda della necessità, come da protocollo ospedaliero. Se ne sconsiglia l'uso per più di 30 giorni.
- Se le prestazioni del dispositivo divergono dalle istruzioni o dal previsto, irrorare attentamente l'ACE Connector in conformità alle istruzioni e verificare l'intero set di alimentazione enterale. Se il problema persiste, sostituire l'ACE Connector™ ed il set di alimentazione enterale, in conformità al protocollo ospedaliero di gestione dell'alimentazione enterica.
- L'ACE Connector è destinato principalmente all'alimentazione enterale dei pazienti. Quando vengono somministrati farmaci, attenersi al protocollo dell'ospedale o della struttura relativo alla gestione dell'alimentazione enterica.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore preferito di articoli sanitari ed ospedalieri. In attesa di brevetto.

Informazioni sugli ordinativi

485

ACE Connector® Dale
Confezione singola
Venduto in scatole da 50.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Non prodotto in lattice di gomma naturale

Made in China 942253-ART_REV_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® e ACE Connector® sono marchi depositati di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti e nell'Unione europea.

ENFit™ è un marchio depositato di GEDSA, usato con il relativo permesso.



MDSS GmbH
Schiffbrannen 41
D-30175 Hannover, Germania

