
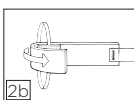


# Dale®

## Houder voor neusverband

### Instructies voor het aanbrengen

1. Plaats het plastic deel van de houder over het neusverband en onder de neus. Maak de houder vast door de oorlussen om de oren van de patiënt te doen.
2. Verstellen (oor tot neus)
  - a. Til het uiteinde van het bandje op en verplaats de oorlus tot de gewenste lengte. Ga op dezelfde manier te werk aan de andere kant.
  - b. Vouw het uiteinde van het bandje over de oorlus. Extra bandlengte kan met een schaar worden afgeknipt.

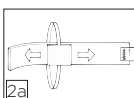

### Het verband vervangen

Vervang het neusverband door een van de oorlussen te verwijderen, het verband te verversen en de oorlus opnieuw om het oor van de patiënt te doen.

### Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmje over het aanbrengen van de houder vindt u op [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

### Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale® is een gedeponeed handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Duitsland

