
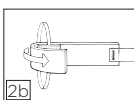


Dale®

Holder til næseforbinding

Anbringelse

1. Centrér holderens plastikdel over næseforbindingen og under næsen. Fastgør den ved at sætte løkkerne rundt om patientens ører.
2. Justering af størrelse (øre til næse)
 - a. Løft remmens ende og flyt løkken, så holderen får den ønskede længde. Gør det samme i den anden side.
 - b. Buk enden af remmen ind over løkken. Overskydende rem kan klippes af.

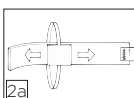

Forbindingsskift

Skift næseforbindingen ved at tage den ene løkke af det ene øre, skifte forbindningen og sætte løkken om patientens øre igen.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale® er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

