
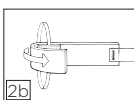


Dale®

Nenäsiteen pidin

Käyttöohjeet

1. Keskitä pitimen muoviosa nenäsiteen päälle nenän alle. Kiinnitä asettamalla korvalenkit potilaan korvien taakse.
2. Koon säätö (korvasta nenään)
 - a. Nosta hihnan pää ylös ja aseta korvalenkki sopivan pituiseksi. Toista sama toisella puolella.
 - b. Taita hihnan pää korvalenkin päälle. Ylimääräinen hihna voidaan leikata pois saksilla.

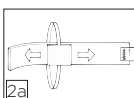

Sidoksen vaihtaminen

Kun nenäside halutaan vaihtaa, irrota toinen korvalenkki, vaihda side ja aseta korvalenkki takaisin potilaan korvan ympäri.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale® on Dale Medical Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja EU:n alueella.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Saksa

