

Dale®

Support de pansement nasal

Instructions pour l'application


1. Centrez la section en plastique du support sur le pansement nasal, en dessous du nez. Maintenez en place à l'aide de boucles que vous accrocherez autour des oreilles du patient.




2. Pour régler la taille (de l'oreille au nez)



- a. Relevez l'extrémité de la bande et repositionnez la boucle à accrocher autour de l'oreille à la longueur désirée. Répétez l'opération de l'autre côté.

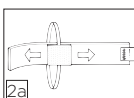

- b. Repliez l'extrémité par-dessus la boucle à accrocher autour de l'oreille. L'excès de matériau peut être coupé à l'aide de ciseaux.

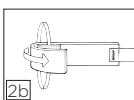

Pour changer le pansement

Pour changer le pansement nasal, retirez l'une des boucles accrochée à une oreille, changez le pansement et replacez la boucle autour de l'oreille du patient.

Usage réservé à un seul patient. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'U.E.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Allemagne

