
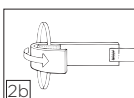


Dale®

Halter für Nasenverband

Anwendung

1. Den Kunststoffteil des Halters über dem Nasenverband und unter der Nase zentrieren. Durch Platzieren der Ohrschlaufen hinter den Ohren des Patienten befestigen.
2. Zum Anpassen der Größe (zwischen Ohr und Nase)
 - a. Das Ende des Bandes anheben und die Ohrschleife in der gewünschten Länge neu positionieren. Auf der anderen Seite wiederholen.
 - b. Das Ende des Bandes über die Ohrschleife falten. Überschüssiges Bandmaterial kann mit einer Schere abgeschnitten werden.

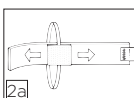

Verbandswechsel

Zum Wechseln des Nasenverbands eine Ohrschleife abnehmen, den Verband wechseln und die Ohrschleife wieder hinter dem Ohr des Patienten befestigen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale® ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Deutschland

