

# Dale®


Συγκρατητής ρινικού επιθέματος

## Οδηγίες εφαρμογής


**1.** 1. Κεντράρετε το πλαστικό τμήμα του συγκρατητή πάνω από το ρινικό επίθεμα και κάτω από τη μύτη. Σταθεροποιήστε το τοποθετώντας τις ελαστικές δέστρες αυτιών γύρω από τα αυτιά του ασθενούς.




**2.** Για να ρυθμίσετε το μέγεθος (από το αυτί μέχρι τη μύτη)

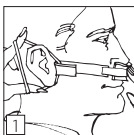

**a.** α. Ανασηκώστε το άκρο του ιμάντα και προσαρμόστε τη θέση της ελαστικής δέστρας αυτιού στο επιθυμητό μήκος. Επαναλάβετε το ίδιο στην άλλη πλευρά.

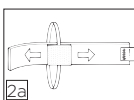

**b.** Διπλώστε το άκρο του ιμάντα πάνω από την ελαστική δέστρα αυτιού. Μπορείτε να κόψετε τον ιμάντα που περισσεύει με ψαλίδι.

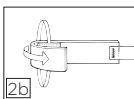

## Για αλλαγή επιθέματος

Για να αλλάξετε το ρινικό επίθεμα, αφαιρέστε τη μία ελαστική δέστρα αυτιού, αλλάξτε το επίθεμα και τοποθετήστε πάλι την ελαστική δέστρα γύρω από το αυτί του ασθενούς.

**Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.**

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

**Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.**

Το Dale® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Γερμανία

