
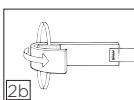


Dale®

Orrkötéstartó szalag

Alkalmazási utasítások

1. Tegye a tartószalag műanyag részét középre az orrkötés fölé és az orr alá. A fülhurkoknak a beteg füle köré helyezésével rögzítse a tartószalagot.
2. A (fül és az orr közötti) méret beállítása
 - a. Emelje fel a pánt végét, majd állítsa be a fülhurokegységet a kívánt hosszra. Ismételje meg ugyanezt a másik oldalon.
 - b. Hajtsa a pánt végét a fülhurokegység fölé. A fölösleges pántrészt ollóval el lehet távolítani.

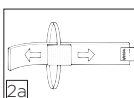

A kötés cseréje

Az orrkötés cseréjéhez vegye le az egyik fülhurkot, cserélje ki a kötést, majd tegye vissza a fülhurkot a beteg füle köré.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Németország

