
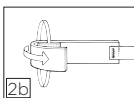
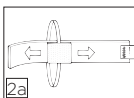


Dale®

Holder for nesebandasje

Påsettingsanvisninger

1. Midtstill plastdelen av holderen over nesebandasjen og under nesen. Fest den ved å legge øreløkkene rundt pasientens ører.
2. Justere størrelsen (øre til nese)
 - a. Løft opp enden på remmen, og juster øreløkken til ønsket lengde. Gjenta på den andre siden.
 - b. Brett enden på remmen over øreløkken. Ekstra remlengde kan klippes bort med saks.

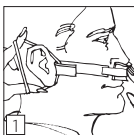

Skifte bandasje

Skift nesebandasjen ved å hekte av den ene øreløkken, skifte bandasje og legge øreløkken rundt pasientens øre igjen.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

