
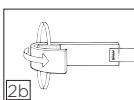


Dale®

Fixador para curativos nasais

Instruções de aplicação

1. Centralize a seção plástica do fixador sobre o curativo nasal e sob o nariz. Prenda ao colocar os aros auriculares ao redor das orelhas do doente.
2. Para ajustar o tamanho (da orelha ao nariz)
 - a. Levante a ponta da correia e reposicione o conjunto do aro auricular no comprimento desejado. Repita no outro lado.
 - b. Dobre a ponta da correia sobre o conjunto do aro auricular. O excesso de material da correia pode ser removido com uma tesoura.

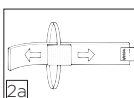

Para trocar o curativo

Para trocar o curativo nasal, remova um aro auricular, troque o curativo e recoloca o aro auricular em torno da orelha do doente.

Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemanha

