

Dale®

Soporte para apósito nasal

Instrucciones de aplicación


1. Centre la parte de plástico del soporte sobre el apósito, debajo de la nariz. Coloque los agarres alrededor de las orejas del paciente para fijar el dispositivo en su lugar.




2. Para ajustar el tamaño (oreja a nariz)



- a. Levante el extremo de la banda y vuelva a colocar el agarre a la longitud deseada. Repita el procedimiento en el otro lado.

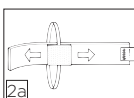

- b. Pliegue el extremo de la banda sobre el agarre auricular. El material

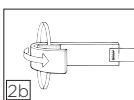

excedente de la banda se puede cortar con tijeras.

Cambio de apósitos

Para cambiar el apósito nasal, retire un agarre auricular, cambie el apósito, y vuelva a colocar el agarre alrededor de la oreja del paciente.

**Para utilizar en un solo paciente.
Desechable.**

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

