
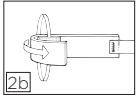
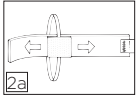


# Dale®

## Nazal Pansuman Tutucu

### Uygulama Talimatı

1. Tutucunun plastik kısmını nazal pansuman üzerinde ve burun altında ortalayın. Kulak halkalarını hastanın kulakları etrafına yerleştirerek sabitleyin.
2. Büyüklüğü (kulak-burun) ayarlamak için
  - a. Şeridin ucunu kaldırın ve kulak halkası tertibatını istenen uzunlukta tekrar konumlandırın. Diğer taraf için de tekrarlayın.
  - b. Şeridin ucunu kulak halkası tertibatı üzerinden katlayın. Fazla şerit malzemesini makasla kesip çıkarabilirsiniz.

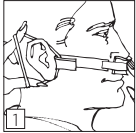

### Pansumanı Değiştirmek için

Nazal pansumanı değiştirmek için bir kulak halkasını çıkarın, pansumanı değiştirin ve kulak halkasını tekrar hastanın kulağının etrafına yerleştirin.

### Tek hastada kullanılmak üzeredir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/ tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

### Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Almanya

