
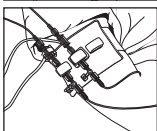
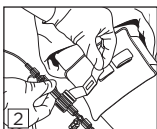


Dale®

Support de transducteurs

Instructions pour l'application

1. Placer le support le long de l'axe phlébostatique (mi-thorax), et l'enrouler autour du bras du patient. Appuyer sur la fermeture auto-agrippante pour sécuriser.
2. Ouvrir les languettes nécessaires de la fermeture auto-agrippante, puis les faire passer par la(les) fente(s) du(des) transducteur(s). Appuyer pour sécuriser.

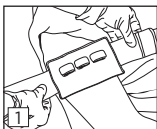

Réservé à l'usage d'un seul patient. Jetable après usage.

Pour voir une vidéo d'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'UE.

Dale Medical Products, Inc.
TÉL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Allemagne

