
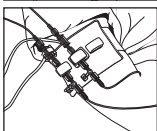
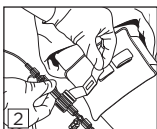


Dale®

ตัวยึดอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

ข้อแนะนำ การใช้งาน

1. จัดวางตัวยึดอุปกรณ์กับศูนย์ของผู้ป่วย (ระดับกึ่งกลางทรวงอก) และพันรอบ ๆ แขนผู้ป่วย กดเทป Hook & Loop เข้าหากันเพื่อยึดให้แน่น
2. แกะสายรัดเทป Hook & Loop หากจำเป็น สอดเส้นไหมผ่านช่องของอุปกรณ์แปลงสัญญาณและกดให้แน่น

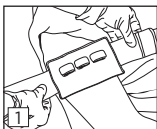

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์ของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

Dale Medical Products, Inc.
โทร.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

