
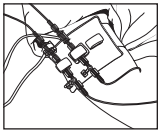
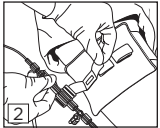


Dale®

Transducer Holder

Uygulama Talimatları

1. Tutucuyu flebostatik eksen (göğüs ortası) hizasında konumlandırın ve hastanın kolunun çevresine sarın. Sabitlemek için yapışkan kanca ve halka tutturucuya bastırın.
2. Gerekli yapışkan kanca ve halka tutturucu bantları açın, transdüserin/transdüserlerin yuvası/yuvaları içinden geçirin ve bastırarak sabitleyin.

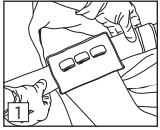

Tek hastada kullanılır. Tek kullanımlıktır.

Uygulama videosu için www.dalemed.com adresini ziyaret ediniz

Doğal kauçuk lateks içermez.

Dale® ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Almanya

